



あすけん

あすけん体組成計

取扱説明書

型式：CS20D-A



JIS B 7613



® 214-230035

本機は、測定時にカラダに微弱な電流を流しその抵抗値から体組成データを推定する“生体電気インピーダンス法 (BIA)”で測定しています。カラダの変化を正しく把握するために、毎回できるだけ同じ時間帯、同じ状態で測定してください。

ご利用になる前に

はじめに本取扱説明書及び記載の警告・注意をよく読み安全に正しくお使いください。


⚠ 警告

- ⊘ ペースメーカーなどの体内機器装着者は、絶対に利用しない。
- ⊘ 妊娠中の方は使用を控える。
- ⊘ 濡れた体でのらない。
- ⊘ 濡れた床など、すべりやすい所には絶対に置かない。

⚠ 注意

- ⊘ 入浴や運動の直後は、正確に計測できない場合があります。
- ⊘ 測定結果は自己判断せず、必ず医師または、資格を持った専門家の指示に従ってください。

各部の名称

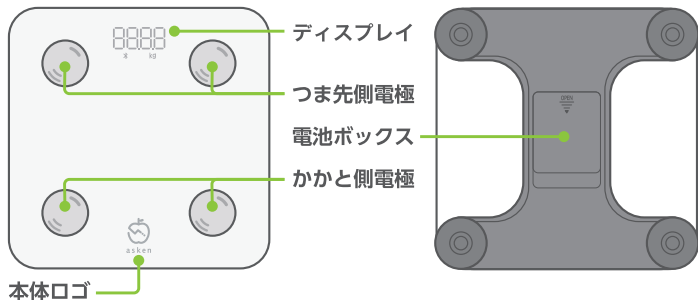

ディスプレイ表示

測定結果は体重のみディスプレイ表示されます。その他の測定値はあすけんアプリ上でご確認いただけます。

体重数値が2回点滅したら体重の計測は完了です。
その後、BIA計測中は0の表示が左右に動きます。
再度、体重数値が表示されたら、全ての計測が完了です。



1年間安心保証

安心して製品をお使いいただくために、ご購入から1年間の品質保証期間を設けております。正常な使用状態で製造上の不備により故障した場合は、無償(送料はお客様負担となります)にて修理または、交換させていただきます。

修理の依頼には機器本体のほか購入日付のわかる購入証明(ご購入時の確認通知メールなど)が必要です。購入証明のない修理依頼に関しましては製造日から1年間を品質保証期間とさせていただきます。

アフターサービス連絡先

■機器本体に関するお問い合わせ

株式会社エーティーワークス

〒930-0856

富山県富山市牛島新町 4-5

メール: query@feelline.jp

電話窓口: 076-411-9511 (平日10~17時まで)

■アプリに関するお問い合わせ

株式会社 asken

〒163-1442

東京都新宿区西新宿 3-20-2

東京オペラシティタワー 42F

メール: asken-info@asken.jp

【保証期間中の修理依頼について】

保証期間内に修理をご依頼の際は、まず株式会社エーティーワークス宛にメールまたはお電話にてお問い合わせください。

お問い合わせいただく前の機器本体の直接郵送による修理依頼は受け付けておりません。

1 あすけん体組成計に電池を入れる

電池を入れる向きに注意して、しっかり挿入してください。

2 「あすけん」をダウンロードする

お手持ちのスマートフォンに、下記のQRコードよりあすけんアプリをダウンロードしてください。

すでにダウンロード済みの方は不要です。



あすけん

QRコードを読み込めない場合は
アプリストアにて「あすけん」と検索してください。

3 「あすけん」を起動する

【はじめてあすけんアプリをダウンロードされた方】

最初に「あすけん」のアカウント作成が必要です。アプリ内の案内に従って、アカウントの作成をしてください。

【すでにあすけんアプリをダウンロード済みの方】

あすけんアプリを起動してホーム画面に移動してください。

あすけん体組成計と連携する

計測を始める前に下記の手順でアプリと体組成計を連携します。

1 ホーム画面の左上の☰を押します。



2 一番下の「設定」を押します。



3 「他サービス・アプリ連携」を押します。



4 「あすけん体組成計」を押します。



あすけん体組成計と連携する

5 「連携する」を押します。



6 Bluetoothの使用を許可します。 ※Androidの方は「位置情報」もONにしてください。



7 あすけん体組成計に乗ってください。



8 連携完了です。



体重を計測する

あすけん体組成計が連携できたら計測してみましょう。

1 「測定」を押します。



2 あすけん体組成計に乗ります。



3 「保存」を押します。



4 ホーム画面にもデータが反映されます。




データの確認方法

測定データはグラフおよび「カラダ記録」画面で確認できます。

1 「体重グラフ」を押します。



2 体重と体脂肪がグラフで表示されます。

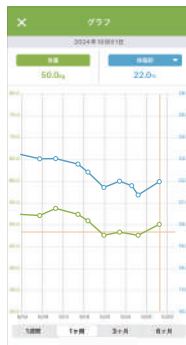

3 「カラダ記録」を押します。



4 13項目の測定データが確認できます。



あすけん体組成計に乗る際の注意点

正しく計測するためには下記に注意してください。

- ❗ 体重計は硬く平らで安定した床に置き使用します。
じゅうたんやクッションフロアの床では正確に計測できません。



- ❗ ゼロ点調整を行ってから計測します。
ゼロ点調整は体重計に負荷をかけ起動させ、すぐに降りることで調整されます。
- ❗ 素足でまっすぐ直立します。
靴下を履いた状態や足の裏が汚れている場合には正確に測定できません。
座ったり、ヒザを曲げた状態では測定できません。
- ❗ 測定時に両足のつま先とかかとをつま先側電極・かかと側電極に正しく合わせます。
- ❗ 測定にBIAを用いるため、以下の場合は測定を行わないでください。

- ・激しい運動の後
- ・アルコール摂取時
- ・サウナや入浴の後
- ・体調の悪い場合（下痢・発熱など）

Q. 利用の際になぜ位置情報の設定をONにするのですか？ (Android)

Android6以降の端末では、Bluetooth通信をするために位置情報の設定をONにする必要があります。ご了承ください。

Q. あすけんプレミアム会員でなくても利用できますか？

あすけん体組成計はどなたでもご利用いただけます。

Q. 体組成計の電源が入りません

電池が切れている、向きが合っていないなどの可能性があります。一度、電池をご確認ください。

Q. あすけんアプリと連携しないで使えますか？

あすけん体組成計に表示されるのは体重のみです。それ以外の体組成データの測定値を確認するには、あすけんアプリとの連携が必須となります。

Q. 計測時にあすけんアプリを起動していないとどうなりますか？

測定データがあすけんアプリに記録されません。過去の測定データはあすけん体組成計本体に保持されないため、後日あすけんアプリに測定データの反映をすることはできかねます。ご了承ください。

Q. あすけん体組成計は複数人で利用できますか？

あすけん体組成計は、ご家族など複数の方と共用いただくことが可能です。ご自身の測定後に別の方が測定しても、過去の測定データが別の方が起動したあすけんアプリに送信されることはありませんのでご安心ください。

Q. ディスプレイに表示される内容の意味を教えてください

アプリとの接続表示



スマートフォン接続中は本体ディスプレイにBluetoothマークが表示されます。

その他表示について



電池が少ないときに表示されます。電池交換をしてください。



測定重量を超えています。



重量センサーのゼロ点を調整しています。表示が消えてから再度本体に乗ってください。

本体の仕様

名称/型式	あすけん体組成計 / CS20D-A
サイズ	270mm×270mm×25mm
電源	単4乾電池3本(付属しません)
ディスプレイ	体重LED表示、オートオフ機能
wireless規格	Bluetooth4.0 class2
計量範囲	0.2～150kg
最小表示単位	100kgまで0.1kg、 100kg以上0.2kg
計量精度	±0.2kg (0.2kg以上～75kg)、 ±0.3kg (75kg以上～100kg)、 ±0.6kg (100kg以上)
測定項目	体重・BMI値・体脂肪率・体水分率・基礎代謝量・除脂肪体重・ 皮下脂肪率、 18歳以上追加項目:骨格筋率・内臓脂肪レベル・筋肉量・骨量・ タンパク質・体内年齢 ※15歳以上を対象とします。 ※体重以外の計測結果はアプリ内に表示されます。 ※体重以外の測定項目は、からだの電気抵抗値などから算出する推定値です。 ※BMIは計算値です。
付属品	取扱説明書
輸入元	株式会社エーティーワークス 富山県富山市牛島新町4-5
販売元	株式会社asken 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー 42F

※ご家庭での測定が主な目的ですので、業務用(品物の売買取引やその他の目方を証明する場合)にはお使いになれません。

